


CountIT (celteller) is een programma dat toelaat een manuele telling uit te voeren. De integratie met LinkIT is optimaal, waardoor de resultaten automatisch naar CorLab verstuurd worden.

Karakteristieken

- Telling met behulp van de muis en numerisch klavier.
- Configuratie van het type cellen (naam, code, knop, ...).
- Configuratie van de te gebruiken toetsen.
- Configuratie van het aantal cellen dat moet geteld worden evenals het aantal tellingen (1 of 2).
- Mogelijkheid om cellen uit te sluiten van de telling.
- Configuratie van de mogelijk toe te voegen commentaren.
- Mogelijkheid om resultaten uit te printen.
- Geluidssignaal dat einde van de telling aangeeft.

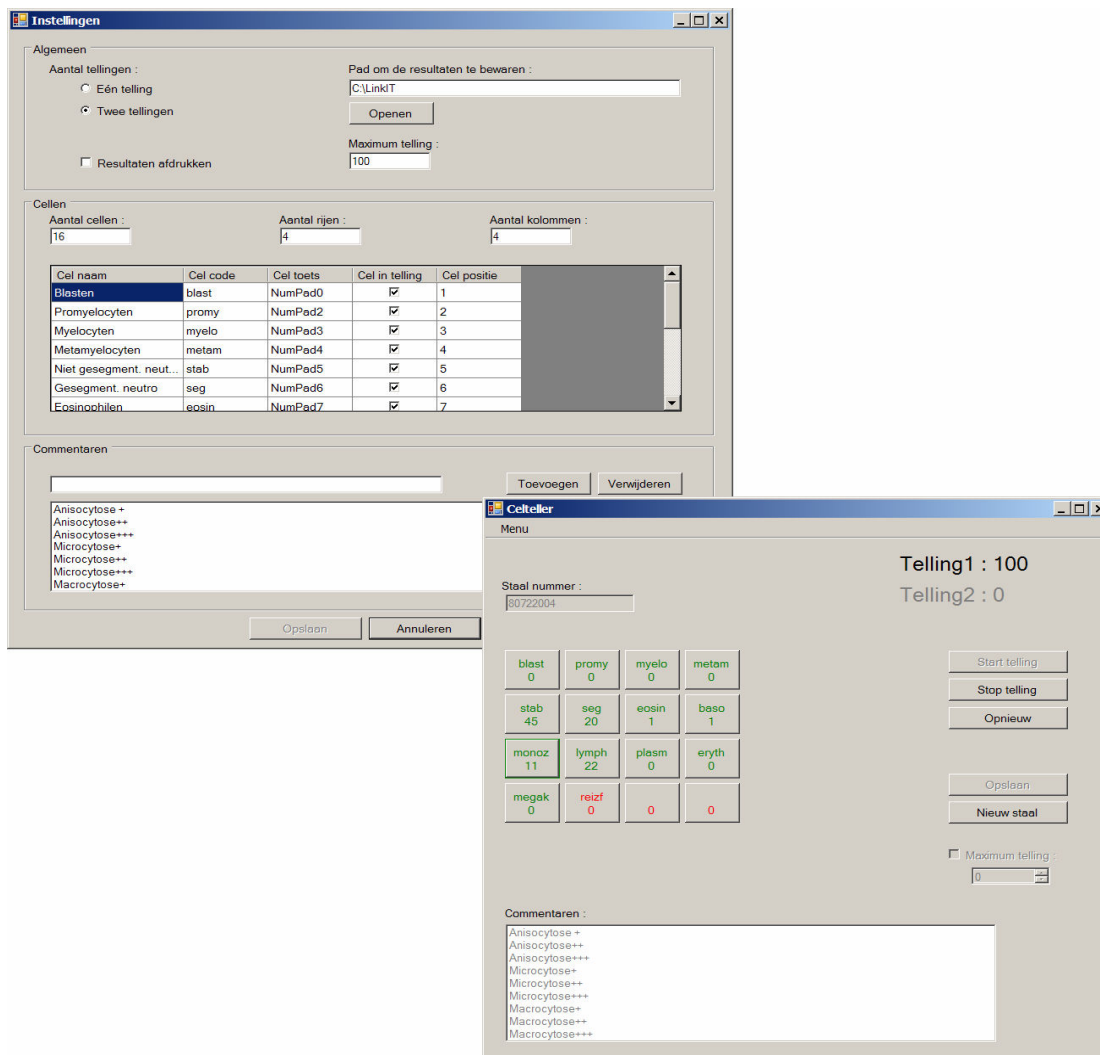

The image shows two overlapping windows from the CountIT software. The background window is titled 'Instellingen' (Settings) and the foreground window is titled 'Celteller' (Cell Counter).

Instellingen (Settings) - Algemeen:

- Aantal tellingen: Eén telling, Twee tellingen
- Pad om de resultaten te bewaren: C:\LinkIT (with 'Openen' button)
- Maximum telling: 100
- Resultaten afdrukken

Instellingen (Settings) - Cellen:

Aantal cellen: 16, Aantal rijen: 4, Aantal kolommen: 4

Cell naam	Cell code	Cell toets	Cell in telling	Cell positie
Blasten	blast	NumPad0	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Promyelocyten	promy	NumPad2	<input checked="" type="checkbox"/>	2
Myelocyten	myelo	NumPad3	<input checked="" type="checkbox"/>	3
Metamyelocyten	metam	NumPad4	<input checked="" type="checkbox"/>	4
Niet gesegment. neut...	stab	NumPad5	<input checked="" type="checkbox"/>	5
Gesegment. neutro	seg	NumPad6	<input checked="" type="checkbox"/>	6
Eosinofielen	eosin	NumPad7	<input checked="" type="checkbox"/>	7

Instellingen (Settings) - Commentaren:

Buttons: Toevoegen, Verwijderen, Opslaan, Annuleren

Celteller (Cell Counter) - Menu:

Telling1 : 100
Telling2 : 0

Staal nummer : 80722004

blast 0	promy 0	myelo 0	metam 0
stab 45	seg 20	eosin 1	baso 1
monoz 11	lymph 22	plasm 0	eryth 0
megak 0	reizf 0	0	0

Buttons: Start telling, Stop telling, Opnieuw, Opslaan, Nieuw staal

Maximum telling : 0

Celteller (Cell Counter) - Commentaren:

Buttons: Opslaan, Annuleren

Maatschappelijke zetel

Universiteitslaan 9

B-3500 Hasselt

☎ +32 11 24 02 34

☎ +32 11 23 34 25

Cegeka Health Care NV/SA

Noorderlaan 87

B-2030 Antwerpen

☎ +32 3 54 54 900

☎ +32 3 54 54 909

www.cegeka.com

cortex@cegeka.com

Cortex

20-22, rue Charles Paradinas

F-92583 Clichy Cedex

☎ +33 1 4106 86 70

☎ +33 1 4106 86 78